




WORLD JAPAN

業務用瘦身機器

# CelluliteZERO

セルライトゼロ

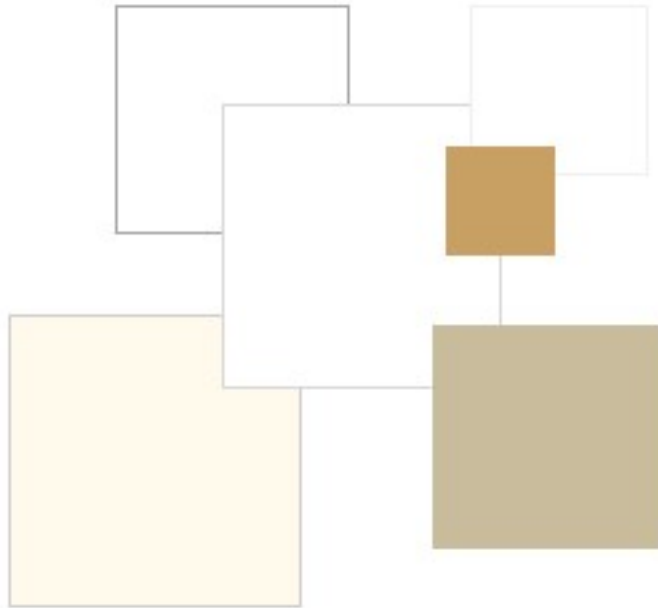

# CelluliteZEROとは？

「温める」「はじける」「溶かす」「もみだす」「引き締める」のパーフェクトスリミング！

セルライトゼロは、  
医療機器メーカーとワールドジャパンが共同開発した美容機器で  
レーザーダイオード、キャビテーション、高周波温熱、LEDが同時出力する  
キャビラジのハンドピースと

サイクロン吸引と、高周波温熱、LEDが同時出力する  
マッサージ機能のサイクロンラジハンドピースにより

脂肪燃焼と燃焼マッサージの両方を兼ね備えた  
世界発のエステ機器瘦身マシーンです。

「はじける」超音波キャビテーションによる脂肪乳化現象



「溶ける」レーザーダイオードによる脂肪液化現象



CelluliteZERO



# セルライトゼロ 5つの機能

「温める」「はじける」「溶かす」「もみだす」「引き締める」のパーフェクトスリミング！

## ラジオ波



ラジオ波（高周波）を照射する事により体内の水分分子を振動させて物理的に摩擦熱を発生させます。深部（蓄熱現象）での温熱によって体の内部を3度～5度上昇させ、脂肪を燃焼させる事で代謝促進し、排泄されます。セルライトゼロは、皮下脂肪に良く効くと言われているマルチポーラ型ラジオ波を使用しています。周波数は0.8MHz帯を使用し皮下脂肪の少し深めを照射します。また、マルチポーラ型は、バイポーラ型、トライポーラ型よりも深い部分まで効果があります。

## キャビテーション



超音波の周波数を体外から物理的に与える事で脂肪細胞の中にキャビテーション現象をおこし、脂肪細胞に穴をあけ脂肪そのものを減少させる技術です。最も脂肪減少に効果の高いと確認された超音波28kHz～40kHz位の中でセルライトゼロは32kHz～38kHz帯を利用しています。

## 低出力レーザー



アメリカFDA認証理論の低出力レーザー（LD）の光（635nm）を照射する事によって皮下に滞在する脂肪細胞を軟化します。軟化した脂肪を代謝・排出する事でボディメイキング効果が期待できます。

## サイクロン吸引



4つのマッサージプログラムによりビギナーからエキスパートのスタッフまで対応。サイクロン吸引で脂肪をしっかり吸引して結果を出していきます。プログラムにより減圧と加圧を繰り返してエステティシャンの手の動きの表現に成功。しっかりとしたマッサージ効果でデトックスしていきます。

## LED




赤色LEDは可視光線の一つであり温熱効果と共に皮下組織の真皮層に影響し繊維芽細胞を刺激してコラーゲンの生成を促しお肌にハリとツヤを与え更にリフトアップが期待されます。

CelluliteZERO

# 温めて・はじけて・溶かすが一台で可能に！


## セルライトゼロ キャビラジ効果

ハンドピース / 左:

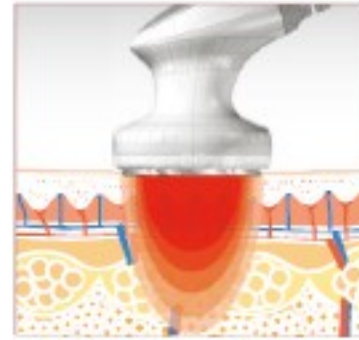


<ラジオ波>

800kHzマルチポーラ式  
表皮、真皮、脂肪層  
・脂肪を温め燃焼  
・代謝アップ

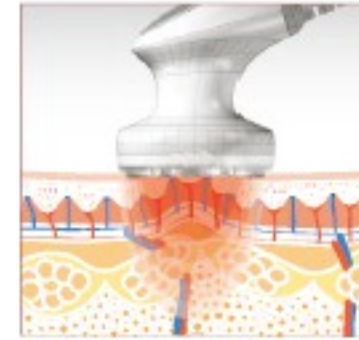


<低出力レーザー>

600nm  
皮下脂肪層  
・脂肪液化  
・アメリカFDA認証理論  
・セルライトレーザーで  
脂肪を分解

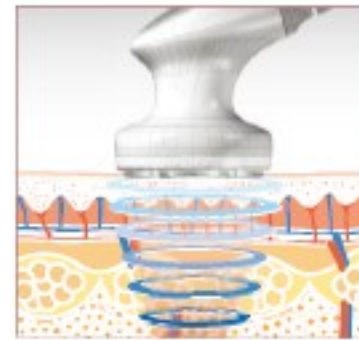

<キャビテーション>

32~38kHz  
皮下脂肪層  
・脂肪細胞を減少  
・凹凸セルライトを改善  
・むくみ改善

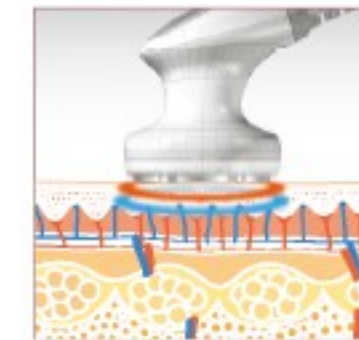

<赤・青色LED>

赤:647nm 青:470nm  
表皮層  
・お肌の引き締め  
・お肌の活性


CelluliteZERO



# 温めて・吸い込んでクラッシュ！


## セルライトゼロ サイクロンラジ効果

ハンドピース右：

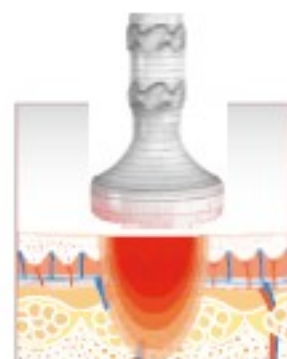


### <ラジオ波>

表皮、真皮、皮下脂肪層  
・脂肪を温め燃焼  
・代謝アップ

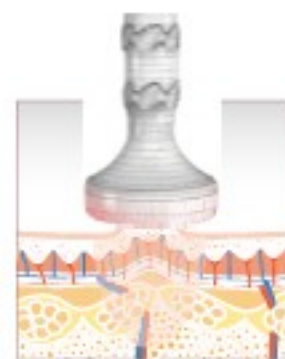

### <サイクロン吸引>

表皮、真皮、皮下脂肪層  
・4つのプログラムで  
吸引マッサージ  
1,タッピング  
2,パワータップ  
3,カッピング  
4,サイクロン

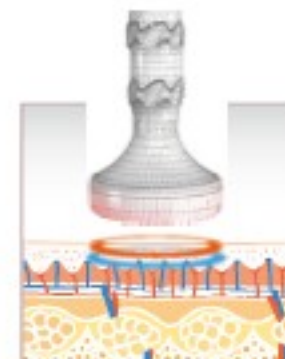

### <LED>


表皮層  
・お肌の引き締め  
・お肌の活性



大・中・小 3種類のハンドピース

CelluliteZERO

# セルライトゼロ タッチパネル

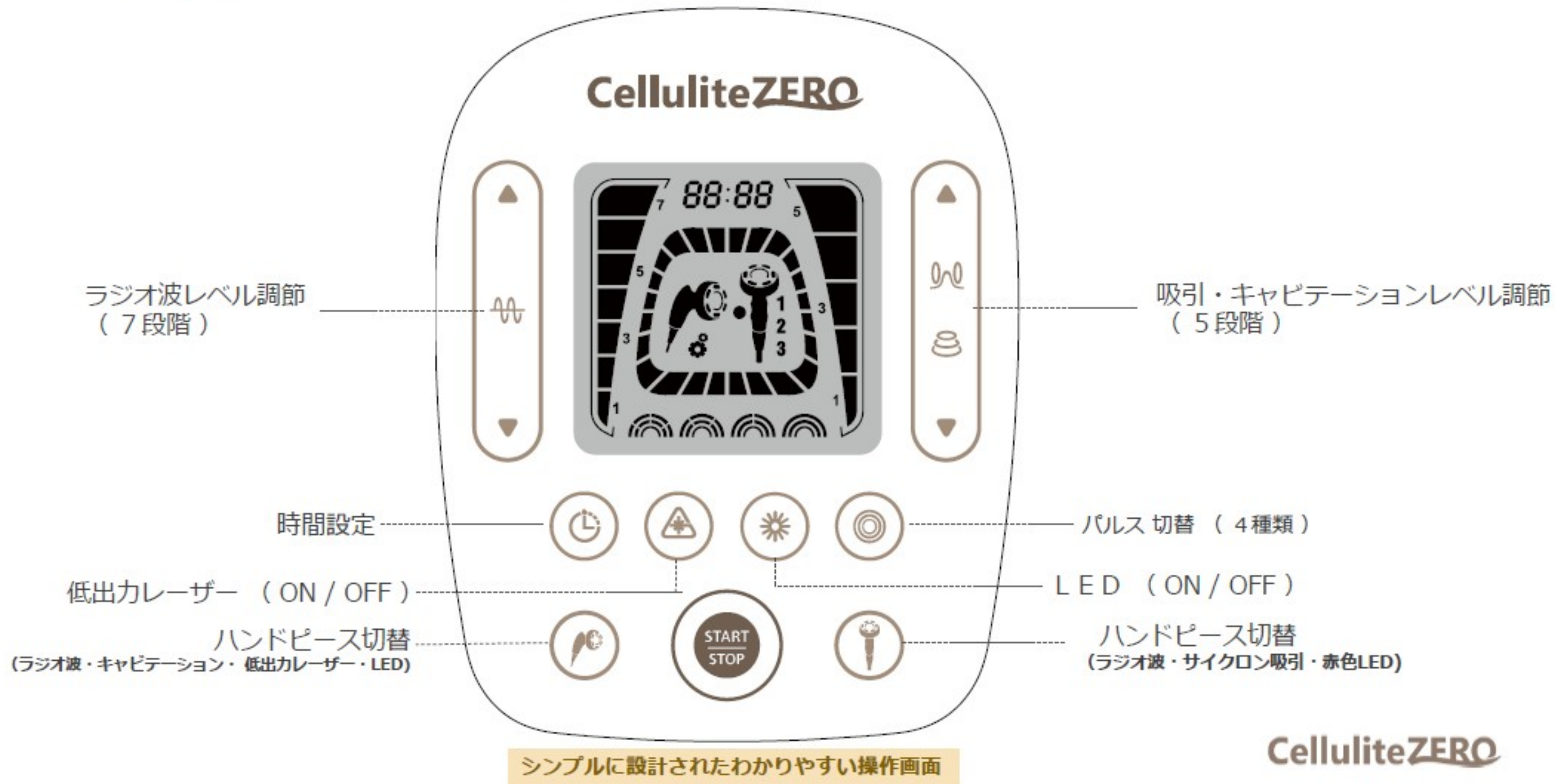




# 業界初！1台5役の複合機

「温める」「はじける」「溶かす」「もみだす」「引き締める」のパーフェクトスリミング！

従来の痩身プログラム

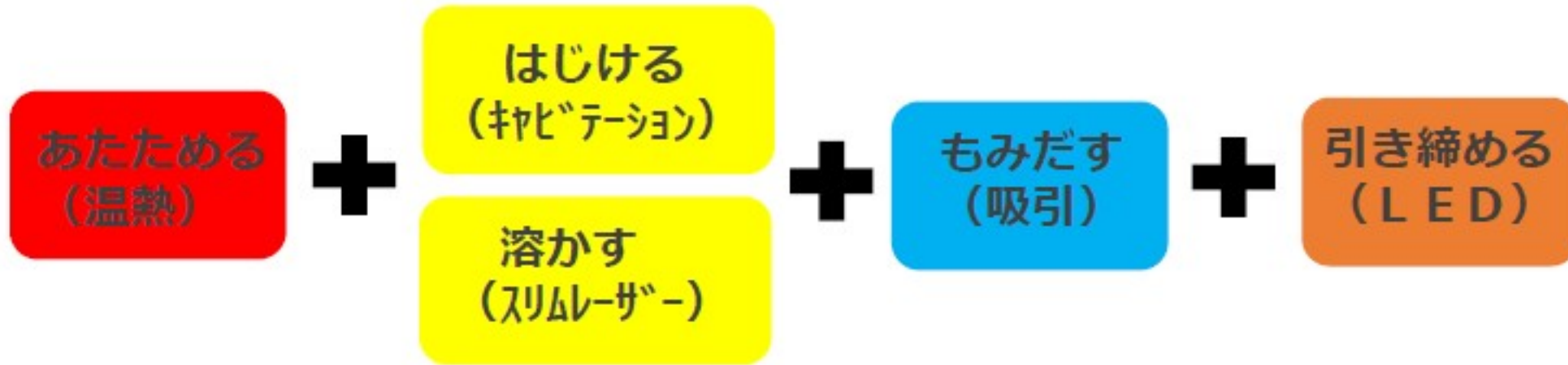

セルライトゼロ痩身プログラム

セルライトゼロ  
(あたためる+はじける+溶かす+もみだす+引き締める)

⇒同時施術により施術時間の短縮につながる



CelluliteZERO

## セルライトゼロ 仕様・料金表

ハンドピース 左	ラジオ波：800K h z L D：650nm/6ea キャビテーション：32~38 K h z L E D：赤（645nm）/青 （470nm）
ハンドピース 右	ラジオ波：800K h z サイクロン吸引 L E D：赤（645nm）
電源/電圧	AC100V 50/60Hz.
消費電力	200w
製品規格	225(H)×415(D)×360(W)
重量	8.5 kg

